

Indications

- > Postoperative use
- > Trauma care
- > Stress fractures
- > Soft tissue injury

Contraindications

- > Open fractures
- > Poor circulation

Cleaning Instructions/Maintenance

- > When the shell or inner liner is slightly dirty, clean it with a damp cloth or a soft brush.
- > Allow the shell or inner liner to air dry only.

Instructions for use

1. Open the hook and loop straps and release the closures of the inner liner.
2. Spread open the liner and place the foot heel first into the walker.
3. Wrap the liner around the foot and secure with the closures.
4. With leg in walker and ankle positioned at 90°, begin securing hook and loop straps, starting at the toes and working towards the knee.

Additional Steps: Tall-Air and Short-Air versions ONLY

5. Inflate liner by pressing the pump. Caution: DO NOT OVERINFLATE.
6. To release air pressure, press the silver button located beneath the pump until air begins to escape.

Caution

Please always follow these instructions for use. In case of adverse effects (such as pain or swelling) discontinue use and consult your medical provider immediately. This device is designed to assist recovery and should be used exclusively under the instruction of and in consultation with a healthcare professional. DARCO® International Inc. does not assume any responsibility for misuse of the product. It is advisable to wear dressings or socks with the walker. Do not wear it in direct contact with injured, irritated, damaged or broken skin. Do not drive a vehicle while you are wearing this device. Use extreme caution when walking on all surfaces when using this device. Walk more slowly than normal. This device is for single-patient use only.

To the patient/user: This device has been designed and manufactured by DARCO® International Inc. to be state of the art for treatment of a specific medical condition. Should any serious incident occur in relation to this device it should be reported to the manufacturer at the contact information listed on this document and the proper authority of the country or state where you are located. If you report this to the manufacturer, they will forward this immediately. When treatment is complete, dispose of this device according to local laws and ordinances.



Manufactured for:
 DARCO® International, Inc.
 810 Memorial Blvd.
 Huntington, WV 25701, USA
 Phone 304.522.4883
 www.darcointernational.com

UK Responsible Person

V-M Orthotics Ltd.
 Unit 25 Halesworth Business
 Centre Norwich Road
 Halesworth Suffolk IP19 8QJ
 United Kingdom


Made in China

**UK
CA**

BASW-IFU-24_Rev0328_UK

Body Armor® Stirrup Walker

Featuring PowerPods®

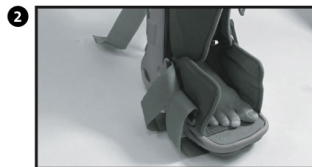

Indicaciones

- > uso posoperatorio
- > tratamiento de traumatismos
- > fracturas por sobrecarga
- > lesión de tejidos blandos

Contraindicaciones

- > fracturas expuestas
- > mala circulación

Instrucciones de limpieza/mantenimiento

- > Cuando la carcasa o el revestimiento interior estén ligeramente sucios, límpielos con un paño húmedo o un cepillo suave.
- > Deje que la carcasa o el forro interior se sequen únicamente al aire libre.

Instrucciones de uso

1. Abra las correas de velcro y suelte los cierres del forro interior.
2. Abra el forro interior y coloque primero el talón del pie en el andador.
3. Envuelva el botín alrededor del pie y asegúrelo con los cierres.
4. Con la pierna en el andador y el tobillo colocados a 90°, comience a asegurar las correas de velcro, comenzando por los dedos de los pies y avanzando hacia la rodilla.

Pasos adicionales: SOLO versiones Tall-Air y Short-Air

5. Infile el revestimiento presionando la bomba. Precaución: NO INFLAR EN EXCESO.
6. Para liberar la presión del aire, presione el botón plateado ubicado debajo de la bomba hasta que el aire comience a escapar.

Precaución

Siga siempre estas instrucciones de uso. En caso de efectos adversos (como dolor o hinchazón) suspenda su uso y consulte a su médico de inmediato. Este dispositivo está diseñado para ayudar en la recuperación y debe usarse exclusivamente bajo las instrucciones y consulta con el profesional de la salud. DARCO® International Inc. no asume ninguna responsabilidad por el mal uso del producto. Es recomendable llevar apósitos o calcetines con el andador. No lo use en contacto directo con piel lesionada, irritada, dañada o rota. No conduzca un vehículo mientras esté usando este dispositivo. Tenga extrema precaución al caminar sobre todas las superficies cuando utilice este dispositivo. Camine más lentamente de lo normal. Este dispositivo es para uso exclusivo de un solo paciente.

Para el paciente/usuario: Este dispositivo ha sido diseñado y fabricado por DARCO® International Inc. para ser lo último en tecnología para el tratamiento de una afección médica específica. Si ocurre algún incidente grave en relación con este dispositivo, se debe informar al fabricante a la información de contacto que figura en este documento y a la autoridad correspondiente del país o estado donde se encuentra. Si informa esto al fabricante, se lo enviará inmediatamente. Cuando finalice el tratamiento, deseche este dispositivo de acuerdo con las leyes y ordenanzas locales.

Indications

- > Utilisation postopératoire
- > Soins de traumatologie
- > Fractures de stress
- > Lésion des tissus mous

Contre-indications

- > Fractures ouvertes
- > Mauvaise circulation

Instructions de nettoyage et entretien

- > Lorsque la coque ou le revêtement intérieur est légèrement sale, nettoyez-le avec un chiffon humide ou une brosse douce.
- > Laissez la coque ou la doublure intérieure sécher à l'air libre uniquement.

Mode d'emploi

1. Ouvrez les sangles auto-agrippantes et relâchez les fermetures de la doublure intérieure.
2. Ouvrez la doublure intérieure et placez le talon du pied en premier dans le déambulateur.
3. Enroulez la doublure autour du pied et fixez-la avec les fermetures.
4. Avec la jambe dans le déambulateur et la cheville positionnées à 90°, commencez à fixer les sangles auto-agrippantes, en commençant par les orteils et en progressant vers le genou.

Étapes supplémentaires : versions Tall-Air et Short-Air UNIQUEMENT

5. Gonflez le liner en appuyant sur la pompe. Attention : NE PAS SURGONFLER.
6. Pour relâcher la pression de l'air, appuyez sur le bouton argenté situé sous la pompe jusqu'à ce que l'air commence à s'échapper.

Mise en garde

Utilisez toujours suivre ces instructions d'utilisation. En cas d'effets indésirables (tels que douleur ou gonflement), arrêtez l'utilisation et consultez immédiatement votre médecin. Cet appareil est conçu pour faciliter la récupération et doit être utilisé exclusivement selon les instructions et en consultation avec un professionnel de la santé. DARCO® International Inc. n'assume aucune responsabilité en cas de mauvaise utilisation du produit. Il est conseillé de porter des pansements ou des chaussettes avec le déambulateur. Ne le portez pas en contact direct avec une peau blessée, irritée, endommagée ou cassée. Ne conduisez pas de véhicule lorsque vous portez cet appareil. Soyez extrêmement prudent lorsque vous marchez sur toutes les surfaces lorsque vous utilisez cet appareil. Marchez plus lentement que d'habitude. Cet appareil est destiné à un usage unique.

Au patient/utilisateur : Cet appareil a été conçu et fabriqué par DARCO® International Inc. pour être à la pointe de la technologie pour le traitement d'une condition médicale spécifique. Si un incident grave survient en relation avec cet appareil, il doit être signalé au fabricant aux coordonnées indiquées sur ce document et à l'autorité compétente du pays ou de l'état où vous vous trouvez. Si vous le signalez au fabricant, il le transmettra immédiatement. Une fois le traitement terminé, jetez cet appareil conformément aux lois et ordonnances locales.